

Therapiesysteme für Pferde

Das Steuergerät VET 2

Unser Steuergerät verfügt über 24 frei einstellbare Frequenzen und 9 unterschiedliche Intensitäten, die Sie in 10%-Schritten von 100% bis 20% verändern können.



Steuergerät VET 2

Ganz einfach lässt sich so für Ihr Tier ein ganz individuelles Programm aus den möglichen 216 unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten anhand der Bedienungsanleitung wählen. Zunächst wählen Sie z. B. für ein Knochenproblem eine Frequenz von 20 Hz. Um sich in die Therapie „einzuschleichen“, wählen Sie eine Feldstärke (Intensität) von 20% und dann eine Therapiezeit von z. B. 20 Minuten.

Warum ist dies so wichtig?

Jeder weiß, dass Tiere wesentlich sensibler sind als Menschen. Dies bedeutet auch, dass ein Tier in der Regel sofort nach dem Einschalten auf die Therapie reagiert. Diese Reaktion kann entweder eine totale Entspannung oder Nervosität sein. Sollte nun Ihr Pferd nervös reagieren, ist es für Sie ein Leichtes, sowohl mit der Frequenz, als auch mit der Feldstärke zu variieren. Dies bietet für Sie und Ihr Pferd ein Maximum an Therapiekomfort. Bei einem Steuergerät mit 3, 5 oder z. B. 7 Programmen sind Sie darauf angewiesen, dass Ihr Pferd die im Programm angebotene Frequenz oder das Frequenzmuster akzeptiert und nicht mit Nervosität reagiert. In der Regel sind den verschiedenen Programmen Krankheitszustände zugeordnet, d. h. um Knochenprobleme zu therapieren, macht es dann auch wenig Sinn, auf ein anderes Programm auszuweichen. Sollte Ihr Pferd nervös reagieren, gibt es für Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder die Nervosität Ihres Pferdes ignorieren und gegen das Empfinden Ihres Pferdes arbeiten oder Ihr neu erworbenes Magnetfeldtherapiesystem beiseite legen und bei diesem Pferd nicht mehr einsetzen, was nur konsequent aber nicht sehr rentabel wäre. Bei unserem VET 2 – Steuergerät haben Sie die Möglichkeit, z. B. die Frequenz beizu-

halten und mit der Feldstärke bei 20% zu beginnen. Auch können Sie die Frequenz um ein oder zwei Hz reduzieren und gleichzeitig z. B. die Feldstärke auf 20% setzen. An dieser Stelle sollte man auch bedenken, dass nicht jedes Tier gleich auf eine Therapie reagiert, doch dies haben Sie sicherlich in der Vergangenheit bei Ihren Tieren auch schon beobachten können.

Außerdem verfügt das Steuergerät über einen Akku, der ca. 30 bis 40 Therapieeinheiten garantiert. Stromkabel sind während der Therapie nicht nötig.



Körperdecke mit integriertem Halsteil und 25 Spulen

Die Körperdecken und Gamaschen

Unsere Körperdecken ohne oder mit integriertem Halsteil verfügen über 16, bzw. 25 Spulen. Dies ist die wohl größte Spulenzahl, die Sie in einer Körperdecke für Pferde finden werden. Außerdem arbeiten wir mit den modernsten, sehr leichten, abwaschbaren Materialien. Bei allen Applikatoren können zum Waschen die Überzüge mittels eines Reißverschlusses abgenommen werden. Die Gamaschen haben zusätzlich ca. 150 cm Kabel im Inneren.

Warum ist dies so wichtig?

Je mehr Spulen, desto mehr Stimulationspunkte. Das Magnetfeld baut sich immer im Zentrum einer Spule auf und nach außen fällt es stark ab. Mit der großen Anzahl an Spulen haben wir neue Maßstäbe im Bereich der Pulsierenden Magnetfeldtherapie gesetzt. Wenn eine Körperdecke z. B. 8, 10 oder 15 kg wiegt, wird sich die Therapie enorm schwer gestalten und derjenige, der dazu „verurteilt“ wird, die Decke aufzulegen, sollte sich im Anschluss an das Auflegen Gedanken machen, ob er selbst eine Therapie benötigt. Man stelle sich einen großen, bis an den Rand gefüllten Wassereimer vor. Dieser hat


Halstherapie-
manschette



zwischen 8 und 10 kg. Nun soll man diesen Wassereimer auf den Rücken eines Pferdes heben. Es gibt doch tatsächlich Körperdecken am Markt, die nicht 10, sondern bis zu 25 kg wiegen. Trotz unserer großen Spulenzahl konnten wir aufgrund sehr leichter Materialien das Gewicht bei unserer Körperdecke mit 16 Spulen bei unter 3 kg halten, was ein Maximum an Tragekomfort für Ihr Pferd und vor allem auch ein Maximum an Bedienkomfort für Sie bedeutet.

Wie wir alle wissen, kann im Stall eine Decke schon mal ein bisschen schmutzig werden. Schön, wenn man den Überzug ganz einfach abnehmen und waschen kann.

Ein längeres Kabel an den Gamaschen gewährleistet, dass man die Applikatoren gemeinsam mit einem Steuergerät betreiben kann. Sie führen das Kabel ganz einfach zu einem Verteiler, an dem dann z. B. die anderen Gamaschen auch eingesteckt sind.

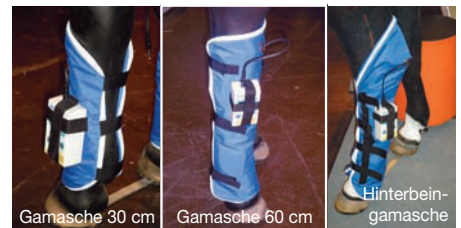

Gamasche 30 cm

Gamasche 60 cm

Hinterbein-
gamasche

Sie haben ein Pferd, das größer oder kleiner ist, so dass eine Standard-Körperdecke oder eine Standard-Gamasche nicht passen?

Dies stellt bei uns kein Problem dar! Senden Sie uns die Decke oder Gamasche, die Ihrem Pferd am besten passt. Wir verwenden dann diese als Schnittmuster und fertigen dann den Applikator nach Maß – bis zum Standardmaß ohne und größere Applikatoren mit einem geringen Aufpreis.